

ELEKTRONICZNY MASAŻER INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Funkcje:

Wyjście na 2 kanały- kanały A i B mogą być stosowane do przeprowadzenia zabiegów jednocześnie.

Można wybrać dowolny z trybów leczenia ramię/talia/stawy/stopy/dłonie)

Produkt jest specjalnie zaprojektowany do zmniejszania bólu mięśni. Aparat może powodować działanie lecznicze, szczególnie dla pacjentów cierpiących na ból w szyi, pleców, odcinka lędźwiowego i różnych stawów. Specjalnie zaprojektowany program składa się z różnych fal i natężenia, dając tym samym poczucie ręcznego masażu. Miękki i delikatny impuls może poprawić krążenie krwi i powodować zmniejszenie zmęczenia.

Użyj Masażera kw305 aby zredukować:

- sztywność ramion. Paraliż nerwów obwodowych.Redukowanie zmęczenia Poprawia krążenie krwi. Stopniowe uwalnianie bólu mięśni.

2. Dane techniczne:

1. Napięcie: DC 3V.


2. Zalecany czas masażu: 30 minut.

3. Akcesoria: Jednostka centralna/2szt elektrody/ 2 przewody do elektrod/ przewód USB /Kalpki magnetyczne do masażu

3. Przygotowanie & podłączenie elektrod.

1. Podłącz poprawnie przewód elektrody z elektrodami lub z kłapkami magnetycznymi.
2. Włóż wtyczkę przewodu elektrodowego do gniazda elektrody.
3. zerwij folię z elektrody.
4. Użyj wilgotnego ręcznika, aby przetrzeć powierzchnię skóry, na której zostaną zamocowanie elektrody. Usuń ze skóry olej, kosmetyk lub inne.
5. Jeżeli elektrody zostaną zabrudzone, zarówno ich przyczepność, jak i liczba użyć zmaleje.
6. Przyklej elektrody na obszar ciała, który chcesz masować. Urządzenie nie będzie działać, dopóki nie zostaną założone przynajmniej dwie elektrody.

Opis przycisków: łącznie 13 przycisków

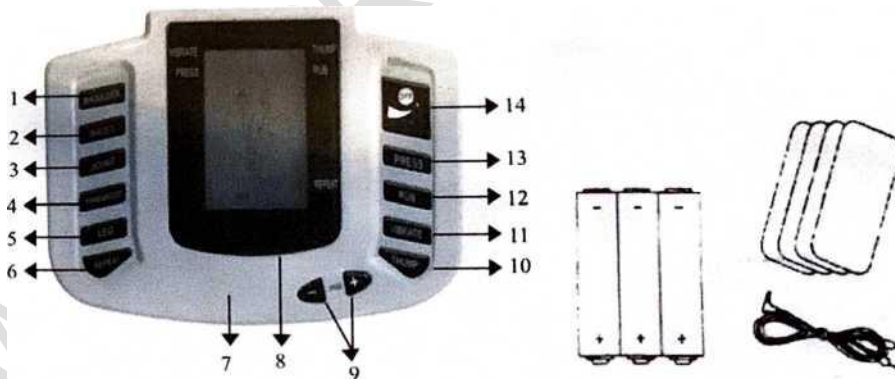

1. Przycisk "Shoulder": odpowiedni do masażu ramion i pleców. Naciśnij przycisk prędkości "+" lub "-", aby wyregulować intensywność masażu. Prędkość jest automatycznie zmniejszana lub zwiększana. Pełne Leczenie trwa 30 minut. Przelączenie trybów co 5 minut (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP).
2. Przycisk "Waist": przeznaczony do masażu w talii. Stan masażu talii pojawi się na ekranie i będzie zmieniał tryb masażu co 5 minut (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP), naciśnij przycisk prędkości "+, -", aby dostosować intensywność.
3. Przycisk "Joint": przeznaczony do masażu stawów, tryb masażu zmienia się co 5 minut (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP), naciśnij przycisk prędkości "+, -", aby dostosować intensywność.
4. przycisk "Hand & Foot" nadaje się do masażu rąk i stóp. Stan masażu dłoni i stóp można zmienić co 5 minut. 4 tryby masażu (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP),
5. Przycisk "Leg": stosuje się do masażu nóg. Tryb masażu zmienia się co 5 minut naciśnij przycisk "+, -", aby wyregulować intensywność.

1.

6. Przycisk „Repeat”: jest przydatny aby powtórzyć 5 różnych funkcji masażu.
7. Czas masażu wyświetlany na ekranie
8. Prędkość masażu wyświetlana na ekranie
9. Szybkość i intensywność: Zwiększanie (+) i zmniejszanie (-) przy użyciu przycisków.
10. Przycisk "Thump": naciśnij go, aby rozpocząć masaż przez udeżenia
11. Przycisk "wibracje": naciśnij go, aby rozpocząć Masaż wibracyjny.
12. Przycisk "RUB": naciśnij go, aby rozpocząć masaż poprzez pocieranie.
13. Przycisk "Press": naciśnij go, aby rozpocząć masaż uciskowy.
14. ON/OFF: włącznik/wyłącznik, aby uruchomić urządzenie lub zatrzymać. istnieje 8 stopni dla natężenia (zaczynaj od najniższego natężenia, w razie potrzeby zwiększaj). Nigdy nie podłączaj urządzenia z ustawionym najwyższym natężeniem.

(5) Rozwiązywanie problemów:

Diagnozowanie problemu i jak rozwiązać.

Brak stymulacji w ogóle.

1. Czy elektrody i przewód są prawidłowo podłączone? Sprawdź połączenie, aby upewnić się, że jest podłączone poprawnie.
 2. Czy elektrody są prawidłowo założone? Zobacz wcześniej w instrukcji, jak założyć je prawidłowo
 3. Czy baterie są naładowane? Jeśli nie, wymień je na nowe.
 4. Czy baterie są prawidłowo włożone? Zdejmij pokrywę baterii i sprawdź czy są włożone prawidłowo.

Urządzenie uruchamia się ale nie ma żadnej stymulacji.

1. Sprawdź poprawność zainstalowania elektrod? Zailanie wyłącz się po około 10 sekundach jeśli jedna z dwóch elektrod zostanie odłączona od ciała, lub nie przylega prawidłowo.

Słaba stymulacja

1. Czy elektrody nie nachodzą na siebie? Jeśli elektrody w jakimś stopniu nachodzą na siebie, popraw ich pozycję aby się nie stykały w żaden sposób.

Skóra zmienia kolor na czerwony.

1. Czy czas zabiegu nie był zbyt długi?
Ogranicz czas masażu do 10-15 minut
2. Czy podkładki/elektrody nie wyschły?
Zwіль powierzchnię elektrod i spróbuj ponownie. Jeśli to nie rozwiązało problemu, podkładki mogły zużyć się, wymień je na nowe.
3. Czy podkładki nie są przyklejone za mocno?
Elektrody powinny przylegać do skóry.

UWAGA

JĘŚLI CIERPISZ NA KTÓRĄŚ CHOROBY ALBO DOLEGLIWOŚĆ, NIE POWINIENES UŻYWAĆ URZADZENIA:

1. Choroba serca
2. Użytkownicy z rozrusznikiem serca
3. Wysoka gorączka
4. Ostre (bolesne) choroby
5. Nieprawidłowe ciśnienie krwi
6. Miesiączki, ciąża lub kobiety po urodzeniu
7. Używanie na chorej lub skaleczonej skórze
8. Maligna, guzy
9. Gruźlica
10. Inne choroby.

Jeśli cierpisz na jakąkolwiek dolegliwość, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

PAMIĘTAJ!

1. Proszę wyjąć baterie, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
2. Nigdy nie nakładaj elektrod na skórę z włączonym zasilaniem w przeciwnym razie może to doprowadzić do nagłego wstrząsu. wstrząsu,
3. Nie nanoś elektrod na inne części ciała podczas działania urządzenia, ani na inną osobę. Przed zrobieniem tego wyłącz urządzenie.
4. Jeśli podczas używania urządzenia odczuwasz jakąś nieprawidłowość, natychmiast przerwij zabieg.
5. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.