

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ELEKTRYCZNA PODKŁADKA DO MASAŻU FOOTSY

KOMPONENTY

- Elektryczna podkładka do masażu
- Pilot
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 2 × bateria AAA (nie dołączone do zestawu)
- Częstotliwość: 1-100 Hz
- Rozmiar: 32,5 × 29,5 cm
- Waga: 57,4 g



KOMPONENTY



- (1) Elektryczna podkładka do masażu
- (2) Pilot
- (3) Przycisk On/zwiększanie intensywności
- (4) Przycisk Off/ zmniejszanie intensywności
- (5) Przycisk wyboru trybu działania
- (6) Kontrolka ostrzegawcza
- (7) Łączniki
- (8) Komora baterii
- (9) Pokrywa komory baterii

OPIS PRODUKTU:

Elektryczna Stymulacja Mięśni (EMS) to sposób powodowania kurczenia się mięśni przy użyciu prądu elektrycznego. Stosowany jest głównie w terapii wzmacniającej mięśnie po urazie i podczas rehabilitacji. Pomaga tylko w zapobieganiu zanikowi mięśni, zwiększa krążenie krwi i rozluźnia mięśnie.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga: to nie jest urządzenie medyczne i jest przeznaczone tylko do użytku w domu. Nie jest przeznaczone do zastępowania urządzenia, które byłoby dostarczane przez lekarza lub terapeutę! Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję obsługi!

○ INSTALACJA BATERII


- Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami AAA.
- Otwórz pokrywę z tyłu urządzenia.
- Włóż baterie i zwróć uwagę na właściwą polaryzację.
- Zamknij pokrywę.

○ UŻYTKOWANIE

- Ustawić podkładkę do masażu na podłodze, tak aby można było wygodnie siedzieć ze stopami w zaznaczonych miejscach podkładki.
- Zatrzasnąć pilota na podkładce. Na podkładce znajdują się dwa łączniki, na których należy umieścić pilota.
- Połóż gołe stopy na zaznaczonych miejscach na podkładce. Urządzenie nie będzie działać, jeśli masz na sobie skarpetki.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk On (3), aby włączyć urządzenie.
- Wybierz tryb masażu, naciskając przycisk „Program”. W sumie dostępnych jest sześć trybów, od masażu ciągłego do różnych

odmian impulsów. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Przed eksperymentowaniem z innymi trybami zalecamy wypróbowanie trybu A.

- Przed rozpoczęciem korzystania z innych trybów, zalecamy wypróbowanie trybu A, aby dostosować się do danego urządzenia.

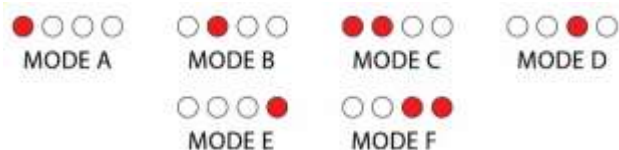

- Po wybraniu trybu, naciśnij przycisk On (3), aby rozpocząć zabieg. Użyj przycisków „INC (zwiększanie intensywności)” (3) / „DEC (zmniejszanie intensywności)” (4), aby ustawić żądaną intensywność. Zalecamy rozpoczynanie z niską intensywnością i zwiększanie jej w miarę przyzwyczajania się do niej.
- Istnieje 10 poziomów intensywności. Są one wskazywane przez to, jak jasno świecą kontrolki. Niska intensywność - ściemnione światło; wysoka intensywność - jasne światło.
- Urządzenie działa przez 12 minut, co stanowi zalecany czas zabiegu. Po tym czasie automatycznie się wyłącza.
- Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie przed upływem tego czasu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Off (4).

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie nigdy nie powinno być używane do łagodzenia lub zmniejszania bólu z powodu niezdiagnozowanych objawów.
- NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA w przypadku posiadania stymulatora serca lub innego implantu medycznego, podczas ciąży, zakrzepicy żył głębokich, wysokiego ciśnienia krwi, jakichkolwiek chorób serca.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia w przypadku jakichkolwiek urazów lub ran na stopach i nogach.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do masażu stóp. Używanie go w jakiegokolwiek innej części ciała może mieć niebezpieczne konsekwencje.
- Produkt nie jest wodoodporny. Nie myć, nie używać w miejscach o dużej wilgotności (łazienka).
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy go rozmontowywać. W przypadku awarii urządzenia należy oddać do punktu serwisowego.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie należy dopuścić do kontaktu urządzenia z jakimikolwiek metalowymi przedmiotami.

- Należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Nie wolno w żaden sposób modyfikować urządzenia.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.